



AccessRx MD™





AccessRx Secure™

Bouclons la boucle du circuit du médicament !

Les chariots de distribution de médicaments AccessRx offre un large éventail de solutions pour transporter et administrer les médicaments de manière plus sûre et plus efficace au chevet des patients.



	AccessRx MD™	AccessRx Secure™
Nombre maximum de bacs	12	12
Tiroirs configurables	✓	✓
Tiroirs patient à verrouillage individuel	✓	✓
Liens logiciels vers le SIH	✓	
Tiroirs pour substances contrôlées en option	✓	✓
Affectation du bac patient	Automatique	Manuel
Matériaux du chariot infusé antimicrobien	✓ 	✓ 

AVANTAGES CLÉS



Bacs et tiroirs à verrouillage individuel



Prise en charge de l'AMCB en temps réel



Prise en charge du remplissage de médicaments centralisé ou décentralisé



Cassettes de médicaments interchangeables



Sécurisez et Suivez les médicaments des patients



Technologie Li-Nano avec garantie de 5 ans


Fermez le circuit de distribution des médicaments entre la pharmacie et le lit du patient.

AccessRx MD™



Sécurité et visibilité des médicaments au chevet du patient

- Les tiroirs spécifiques patients à verrouillage individuel sont accessibles en scannant le code-barres du patient
- L'administration des médicaments au chevet du patient en temps réel, l'identification des patients par code-barres et l'accès direct à la prescription informatisée rationalisent le processus d'AMCB (Administration des Médicaments à Codes Barres), réduisent la redondance et augmentent la précision
- Les tiroirs des patients sont automatiquement attribués grâce à l'interface ADT (admission/décharge/transfert), ce qui élimine tout risque d'erreurs lors du fastidieux étiquetage manuel des tiroirs
- Utilise l'Active Directory de l'hôpital pour une authentification cohérente des utilisateurs
- Possibilité de personnaliser l'interface utilisateur

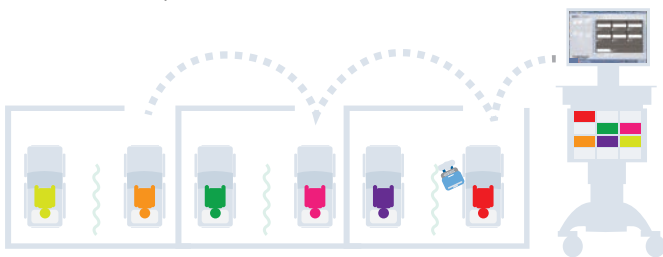

Rationalisez votre flux de travail

- Sécurisez et suivez les médicaments spécifiques de vos patients, jusqu'à 12 patients dans des tiroirs à verrouillage individuel, réduisant ainsi les déplacements et le temps passé à l'armoire de distribution automatisée (ADA)
- L'interface ADT et les commandes pour les patients sont transmises via le réseau sans fil au chariot pour faciliter une livraison plus rapide des médicaments
- Diminution des déplacements et du temps passé à l'armoire de distribution automatisée

Un meilleur contrôle et plus de souplesse pour les pharmaciens grâce à la diversité des modèles de distribution des produits pharmaceutiques

- Le logiciel AccessManager™ basé sur un navigateur donne accès aux rapports tout en permettant, grâce à sa compatibilité avec l'Active Directory, de gérer les utilisateurs, de gérer la flotte et de configurer les systèmes
- Des contrôles d'accès configurables et basés sur l'heure réduisent le risque d'administration de médicaments au mauvais moment et facilitent la reconciliation en pharmacie des médicaments inutilisés
- Interface optionnelle de commandes de médicaments - Rx MD peut agir en tant que remplisseur de commandes de médicaments pour les patients et vérifier qu'une commande a été administrée
- Alertes électroniques sécurisées pour les patients transférés et sortis

Architecture logicielle, intégration évolutives et centralisées

- Multi-Org - architecture évolutive - capacité de passer d'une clinique à deux lits à un système de santé multi-établissements
- Possibilité de configurer des droits d'accès au système de santé, par exemple par service
- Rapports d'entreprise disponibles
- Déploiement multi-établissements au sein d'un réseau hospitalier
- Interface ADT conforme HL7 (données démographiques des patients) et interface RDE (commandes approuvées par la pharmacie)
- Le moteur d'interface configurable communique facilement avec le SIH
- Gestion de projet, installation et formation par l'équipe de services professionnels de TouchPoint Medical

Conservez et sécurisez vos médicaments
au chevet du patient.

AccessRx Secure™



Sécurisez les médicaments tout au long du flux de travail

- Tiroirs verrouillables individuellement
- Logiciel facile à utiliser
- Configurations de stockage permettant de sécuriser divers médicaments et substances contrôlées
- Tiroirs en polycarbonate fumé de 102 mm à 152 mm.
- Rangement verrouillable en aluminium et tiroirs à substances contrôlées
- Les champs d'affichage des tiroirs configurables permettent la personnalisation de l'interface utilisateur
- Ajoutez des options logicielles AccessRx MD™ aux chariots AccessRx Secure™ existants pour une solution personnalisée et évolutive



Configurez votre système en fonction de vos besoins en médicaments et en fournitures.



Dimensions

Largeur
Hauteur
Profondeur
Volume

	Tiroirs de 102 mm (4 pouces)	Tiroirs de 152 mm (6 pouces)	Tiroirs pleine largeur pour substances contrôlées
Largeur	91,4 mm (3,6 pouces)	142,2 mm (5,6 pouces)	271,8 mm (10,7 pouces)
Hauteur	238,8 mm (9,4 pouces)	238,8 mm (9,4 pouces)	228,6 mm (9 pouces)
Profondeur	55,9 mm (2,2 pouces)	55,9 mm (2,2 pouces)	50,8 mm (2 pouces)
Volume	1213 cm ³ (74 pouces ³)	1885 cm ³ (115 pouces ³)	3195 cm ³ (195 pouces ³)



Contactez votre représentant TouchPoint Medical pour en savoir plus et discuter des accessoires supplémentaires spécifiques à votre application de point de service. Visitez le site touchpointmed.com/contact pour contacter votre représentant local.

20211027-BR-MedicationDeliveryCarts-FR