



medDispense[®]

Propulsé par
medLogic[™]

Systèmes de distribution automatisés

Une seule plateforme logicielle pour une infinité de configurations matérielles, toutes fonctionnant en synergie pour vous offrir une automatisation plus sûre et plus efficace de votre flux de travail clinique.

TouchPoint
MEDICAL 

La série medDispense® vous offre le contrôle et la flexibilité nécessaires pour choisir la méthode la plus efficace en matière de stockage et de distribution sécurisée des médicaments.



Série C



Série F



Série V

medDispense®

Distribution d'une seule dose		✓	
Stockage en masse	✓	✓	✓
Accès progressif aux tiroirs		✓	
Technologie de guidage Pick-to-Light		✓	✓
Construction en acier		✓	✓
Contrôle d'élément unique	✓	✓	

PRINCIPAUX AVANTAGES



Gestion des stocks de substances contrôlées avec medGuard™



Solutions évolutives s'adaptant à vos besoins



Protection antimicrobienne



Gestion à distance des files d'attente des médicaments avec NurSync™



Une plateforme logicielle compatible avec tous les équipements



Nombreuses configurations de stockage sécurisé



Interfaçage HL7

La valeur de medDispense®

La sécurité des médicaments et l'efficacité du flux de travail sont cruciales pour le processus d'administration des médicaments. medDispense® offre la plus vaste gamme de matériel de distribution interchangeable du marché, laquelle s'appuie sur medLogic™, une plateforme logicielle entièrement intégrée.



Plateforme logicielle medLogic™

Les armoires medDispense® sont interchangeables, vous offrant une flexibilité maximale pour le rangement de vos médicaments.

Ajustez facilement votre capacité de stockage de médicaments à vos besoins.

- Toutes les armoires medDispense® fonctionnent en synergie pour répondre aux besoins actuels et futurs.

Éliminez les contraintes liées à l'espace grâce à un large choix d'options de stockage.

- Des solutions de stockage sont disponibles, allant des petits meubles de comptoir aux grandes armoires pour le stockage en masse.

Un large éventail de configurations pour répondre à vos besoins en matière de capacité et de flux de travail

- Combinez, en toute sécurité, la distribution de doses uniques et le stockage en masse. Tous les équipements medDispense® peuvent être intégrés et sont alimentés par medLogic™.

Logiciels et matériels hautement configurables

- Avec medLogic™, vous pouvez facilement configurer les paramètres utilisateur et les mesures de sécurité ainsi que la configuration des compartiments pour profiter d'un système à la flexibilité optimale.



Configurations matérielles medDispense®

Distribution sûre et sécurisée.

Conçu pour réduire les risques d'erreurs médicamenteuses et assurer un stockage sécurisé, medDispense® garantit la mise en place de mesures de sécurité appropriées pour chaque article distribué.

Stockage de substances contrôlées de haute sécurité

- Distribution à l'unité avec des tiroirs progressifs en acier (conforme à la réglementation britannique ECD).
- Signature d'un témoin en option pour le retrait, la mise au rebut, le retour ou le remplacement.
- Suivi des écarts et notification.
- Le module de gestion des substances contrôlées medGuard™ assure une visibilité et une gestion à l'échelle du système des stocks de substances contrôlées, avec un suivi des livraisons en boucle fermée.



Mesures de protection logicielle

- medLogic™ dote toutes les armoires medDispense® de fonctionnalités intégrées telles que le précomptage, les profils des médicaments des patients, l'impression de reçus et d'étiquettes et la recherche configurable de patients et de médicaments.
- Le logiciel de gestion des stocks medGuard™ assure un réapprovisionnement en boucle fermée pour les substances contrôlées.
- Fonctionnalités logicielles supplémentaires :
 - Alertes d'allergies, alertes de doses en double, lecture de codes-barres, alertes de sons similaires, lettrage tall man.



Accès et rapports authentifiés


- Tous les médicaments et toutes les fournitures sont stockés dans un environnement contrôlé, verrouillé et soumis à accréditation.
- Le module logiciel PharmacyCenter™ permet de visualiser et de contrôler à distance les stocks de la pharmacie.
- Contrôlez l'accès à des fonctions spécifiques grâce aux autorisations au niveau de l'utilisateur et aux profils basés sur les rôles.

Planification et soutien


- Notre équipe de services professionnels travaille en étroite collaboration avec vous pour optimiser l'emplacement des médicaments et les niveaux de sécurité en fonction des processus de votre établissement.
- Interfaces système conçues sur mesure par nos intégrateurs de services professionnels.
- Des plans d'assistance technique flexibles et de maintenance préventive peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques.

Efficacité du flux de travail.


Avec medLogic™, le personnel infirmier et le personnel de pharmacie peuvent travailler plus intelligemment, sans fournir plus d'efforts. Des modules logiciels tels que NurSync™ et PharmacyCenter™ améliorent l'efficacité de votre flux de travail quotidien.

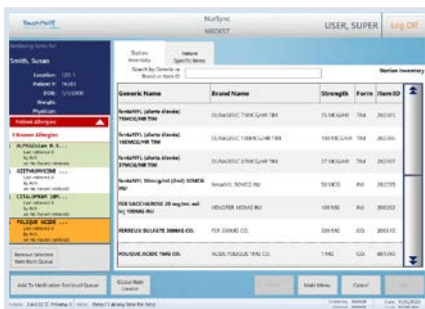

NurSync™ crée une file d'attente

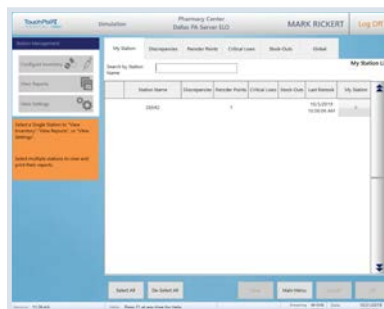

Gestion de la station PharmacyCenter™

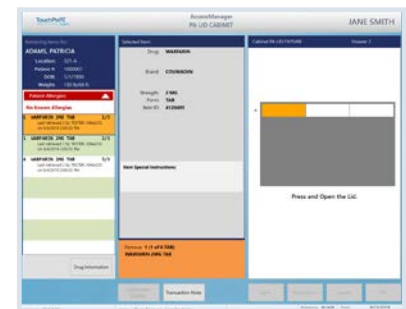

Récupération d'éléments avec medLogic™

Mise en file d'attente des médicaments à distance

- Optimisez le temps passé avec les patients et minimisez le temps passé devant l'armoire de distribution automatisée avec la mise en file d'attente des médicaments à distance grâce à NurSync™ depuis votre chariot AccessRx MD™ ou votre poste de travail en réseau.

Amélioration de la visibilité des niveaux de stock pour l'ensemble des armoires medDispense®

- Gérez rapidement et facilement vos stocks et réduisez les ruptures de stock dans toutes les armoires medDispense® de votre établissement grâce à PharmacyCenter™.

Interface utilisateur intuitive

- Données démographiques des patients, profil des médicaments et formulaires gérés via une interface HL7 personnalisée. L'interface utilisateur intuitive réduit le temps passé devant le contrôleur de distribution automatique.



AccessRx MD™

medLogic™

Un ensemble de solutions matérielles et logicielles intégrées permettant un stockage, une distribution et un transport sûrs et efficaces des médicaments.



NurSync™

Mise en file d'attente
des médicaments à
distance



medGuard™

Gestion des stocks
de substances
contrôlées




PharmacyCenter™

Création de rapports
et administration du
système



medLogic™

Options de serveur
medLogic™ flexibles

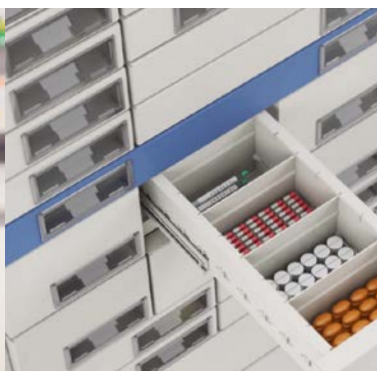

Avantages de medLogic™

La plateforme logicielle medLogic™ offre une efficacité et une flexibilité accrues à votre équipe, et un environnement sûr à vos patients.



Efficacité

Prise en charge des kits de plusieurs articles

- La pharmacie peut créer des kits prédéfinis contenant plusieurs articles pour des modalités, des procédures ou des protocoles spécifiques.

Stockage de codes-barres

- Approvisionnez vos armoires rapidement et efficacement grâce au lecteur de codes-barres sans fil en option.
- Éliminez le temps passé à saisir, recherchez et sélectionnez des éléments à l'écran.

Flux de travail de stockage FIFO

- Les articles medLogic™ sont distribués selon le principe du premier entré, premier sorti afin d'optimiser le cycle de vie des stocks.
- Réduisez les dépenses liées aux médicaments périmés.

Déchets de médicaments suivis

- Comparez la quantité prescrite à la quantité distribuée. Il est rappelé à l'utilisateur de documenter la quantité non administrée.



Sûreté et sécurité

Registre UK NHS ECD entièrement pris en charge

- Prend en charge le flux de travail requis pour les demandes et la distribution, ainsi que l'enregistrement des transactions.
- Rapport sur le solde des stocks.

Génération à la demande de rapports de stock par article/médicament

- Génération d'un rapport de réapprovisionnement en un clic.

Recherche de médicaments configurable

- Contribue à réduire les erreurs de distribution grâce à une recherche de médicaments configurable à plusieurs caractères.

Stockage par numéro de lot

- Améliorez la traçabilité de vos médicaments lorsque vous avez besoin de savoir où ils se trouvent.



Flexibilité

Stockage et distribution de doses fractionnées

- Les fonctions de distribution, de retour et de gestion des déchets prennent en charge les valeurs décimales.
- Réduction du gaspillage de médicaments.

Gestion des articles en masse

- Règles de facturation flexibles pour les articles en masse fréquemment distribués.


Affichage haute définition et ordinateur portable

- Désormais, des options d'affichage plus flexibles pour les modules PharmacyCenter™ et NurSync™.
- Modes de distribution configurables par l'utilisateur pour les tiroirs progressifs.
 - Mode linéaire sécurisé
 - Multimode
 - Article de ligne unique

Le système sécurise et suit à la fois vos médicaments et vos fournitures tout en s'intégrant de manière transparente à tous les systèmes d'information hospitaliers.

NurSync™

Le module NurSync™ permet au personnel infirmier de réduire le temps passé au poste de distribution des médicaments et d'augmenter le temps passé avec les patients.

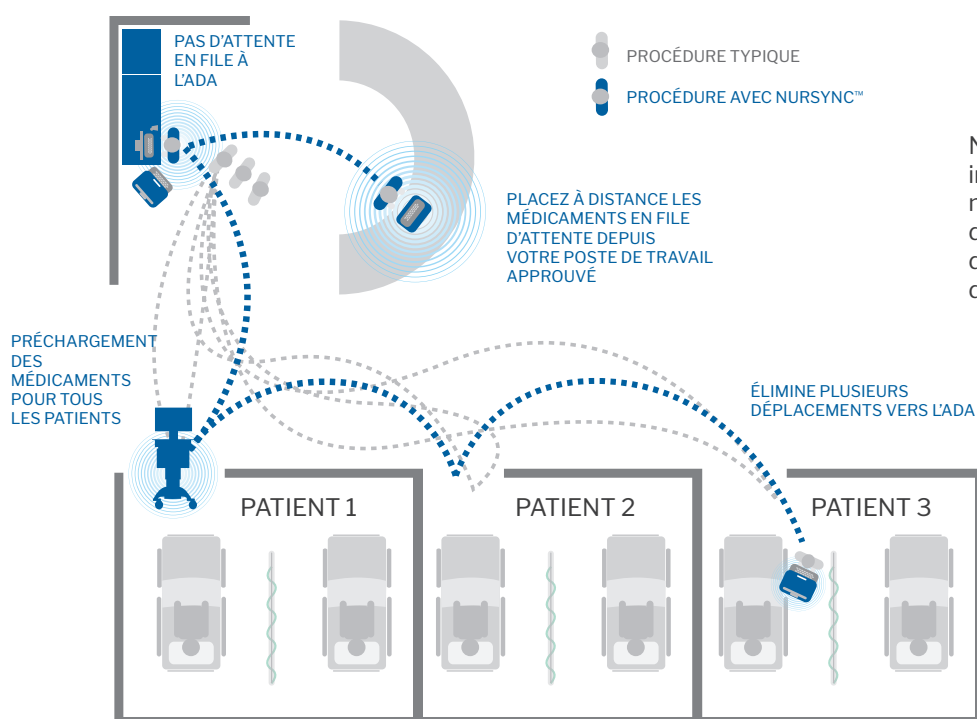

NurSync™ permet au personnel infirmier de créer des files d'attente de médicaments afin de réduire le temps de récupération des médicaments, d'améliorer l'efficacité du flux de travail et de passer plus de temps avec les patients.

Facile comme bonjour !

1

Installez le module NurSync™ sur un ordinateur affecté à l'ADA tel que votre poste de travail AccessPoint™.



AccessRx MD™

AccessPoint™

2

Connectez-vous pour créer, gérer et supprimer les files d'attente de médicaments des patients, ainsi que pour documenter les déchets de médicaments contrôlés.



Menu principal de NurSync™

3

Lorsque vous êtes prêt(e), allez jusqu'à l'armoire medDispense® et récupérez les articles de votre file d'attente enregistrée.




Distribuez vos médicaments

medGuard™

Le module medGuard™ permet aux établissements de stocker et de suivre les substances contrôlées depuis un emplacement central et sécurisé.



Menu principal de medGuard™

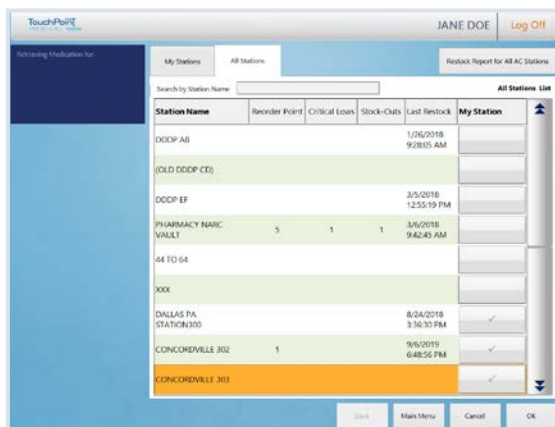

Écran de sélection de medGuard™

Assurez-vous que les substances contrôlées atteignent leur armoire finale medDispense® spécifiée

- Aide à fermer la boucle de la distribution de médicaments et surveille les détournements potentiels grâce à l'accès contrôlé au réapprovisionnement et aux protections logicielles.
- Le suivi des anomalies permet de garantir que la quantité récupérée enregistrée dans medGuard™ correspond à la quantité réapprovisionnée dans l'armoire de distribution automatisée medDispense®.
- Le comptage optionnel en fin de quart de travail avec medGuard™ offre une traçabilité supplémentaire.

Consultez facilement les stocks de substances contrôlées de vos armoires medDispense®

- Créez des rapports de réapprovisionnement en substances contrôlées pour toutes les armoires.
- Contrôlez la visibilité des armoires grâce à la personnalisation des accès utilisateurs.
- Les localisateurs d'articles globaux et les rapports des stocks globaux vous donnent un accès instantané aux quantités et aux emplacements de substances contrôlées de votre établissement.
- Des indicateurs clairs de l'état des stocks à chaque armoire medDispense®.




Série V d'armoires medDispense® avec portes transparentes et portes en acier.

Compatibilité matérielle :

medGuard™ peut être installé sur n'importe quelle armoire medDispense®. La série medDispense® V est particulièrement recommandée pour ses compartiments de rangement configurables.

PharmacyCenter™

Le module PharmacyCenter™ permet à la pharmacie de gérer les médicaments de plusieurs armoires medDispense® avec un tableau de bord et un système de rapport faciles à utiliser.

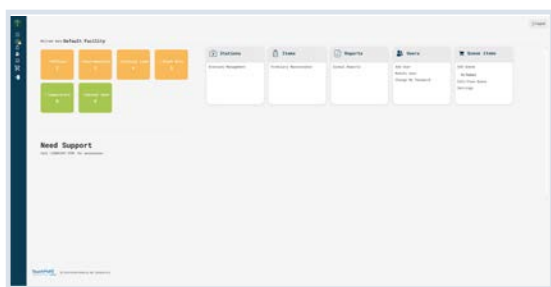

Menu principal de PharmacyCenter™

Avantage de PharmacyCenter™

✓ Créez un rapport	✓ Localisez les articles en très faible quantité
✓ Configurez le stock	✓ Identifiez les articles en rupture de stock
✓ Affichez les divergences	✓ Configurez les paramètres de l'armoire
✓ Maintenance par l'opérateur	✓ Accès à l'aide d'un navigateur

Visibilité et gestion de votre stock sur toutes les armoires

- Définissez des emplacements de stockage spécifiques pour chaque médicament ou article du stock.
- Ajoutez, supprimez ou modifiez un médicament pour l'armoire sélectionnée.
- Vérifiez les numéros d'article, les descriptions et définissez la classe de médicament.
- Surveillez les médicaments en quantité faible, en rupture de stock ou périmés.
- Définissez les médicaments qui peuvent être remplacés.

Des rapports qui comptent

- Créez des rapports sur les indicateurs clés importants pour votre établissement (stocks, médicaments les plus utilisés, transactions, médicaments contrôlés, etc.).
- Choisissez parmi les paramètres prédéfinis ou personnalisez les vôtres.
- Programmez automatiquement l'impression ou l'envoi par e-mail des rapports.
- Exportez les données du rapport.
- Rapports personnalisés ad hoc.

Location	Reference	Peak Date	Quantity	Onhand	Critical Low	Minimum	Maximum	Reorder	Unit	Last Update
Armoire 0-01	ASACAP-001	11/15/16	10	10	10	10	10	10	1	11/15/2016 11:13:27
Armoire 0-01	ASACAP-002	11/15/16	10	10	10	10	10	10	1	11/15/2016 11:13:27
Armoire 0-01	ASACAP-003	11/15/16	10	10	10	10	10	10	1	11/15/2016 11:13:27
Armoire 0-01	ASACAP-004	11/15/16	10	10	10	10	10	10	1	11/15/2016 11:13:27
Armoire 0-01	ASACAP-005	11/15/16	10	10	10	10	10	10	1	11/15/2016 11:13:27
Armoire 0-01	ASACAP-006	11/15/16	10	10	10	10	10	10	1	11/15/2016 11:13:27
Armoire 0-01	ASACAP-007	11/15/16	10	10	10	10	10	10	1	11/15/2016 11:13:27
Armoire 0-01	ASACAP-008	11/15/16	10	10	10	10	10	10	1	11/15/2016 11:13:27
Armoire 0-01	ASACAP-009	11/15/16	10	10	10	10	10	10	1	11/15/2016 11:13:27
Armoire 0-01	ASACAP-010	11/15/16	10	10	10	10	10	10	1	11/15/2016 11:13:27


Rapport des stocks

Location	Reference	Peak Date	Quantity	Onhand	Critical Low	Minimum	Maximum	Reorder	Unit	Last Update
Armoire 0-01	ASACAP-001	11/15/16	10	10	10	10	10	10	1	11/15/2016 11:13:27
Armoire 0-01	ASACAP-002	11/15/16	10	10	10	10	10	10	1	11/15/2016 11:13:27
Armoire 0-01	ASACAP-003	11/15/16	10	10	10	10	10	10	1	11/15/2016 11:13:27
Armoire 0-01	ASACAP-004	11/15/16	10	10	10	10	10	10	1	11/15/2016 11:13:27
Armoire 0-01	ASACAP-005	11/15/16	10	10	10	10	10	10	1	11/15/2016 11:13:27
Armoire 0-01	ASACAP-006	11/15/16	10	10	10	10	10	10	1	11/15/2016 11:13:27
Armoire 0-01	ASACAP-007	11/15/16	10	10	10	10	10	10	1	11/15/2016 11:13:27
Armoire 0-01	ASACAP-008	11/15/16	10	10	10	10	10	10	1	11/15/2016 11:13:27
Armoire 0-01	ASACAP-009	11/15/16	10	10	10	10	10	10	1	11/15/2016 11:13:27
Armoire 0-01	ASACAP-010	11/15/16	10	10	10	10	10	10	1	11/15/2016 11:13:27

Configurez le stock

medLogic™

Options de serveur flexibles. Quel que soit le besoin du client pour l'hébergement de medLogic™, nous pouvons y répondre.

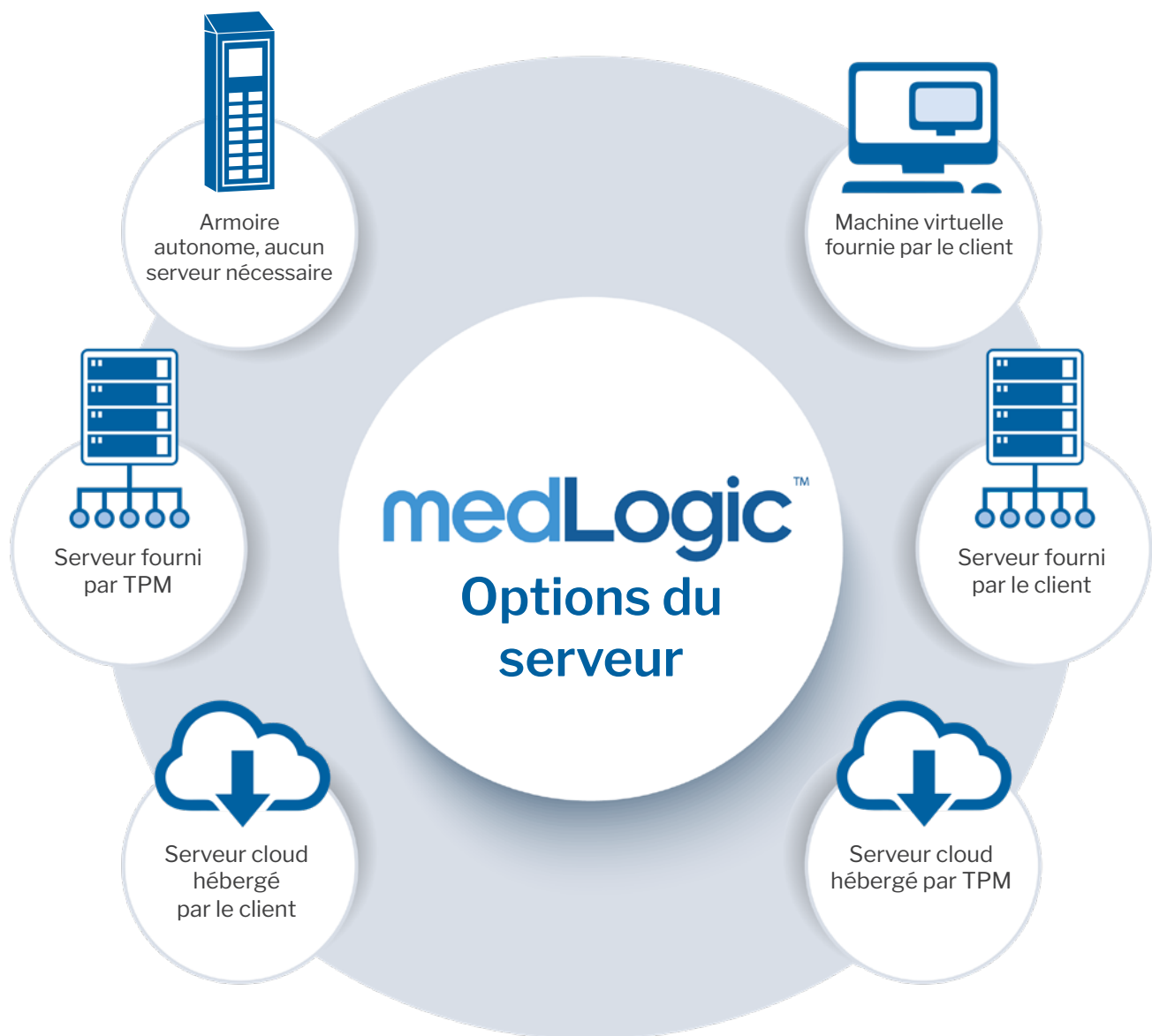

Capacité personnalisable – des tiroirs
linéaires configurables au stockage en
masse de grande capacité.

medDispense®
C series



Base 30 avec portes transparentes
et système de tiroirs

Stockage en masse dans un cadre plus petit

- Le stockage en masse ou les articles volumineux peuvent être stockés et distribués en toute sécurité.
- Bacs et étagères modulables pour s'adapter à une variété d'articles en masse.
- Livré avec un pont supérieur standard.

Tiroirs à couvercle

- Un seul tiroir large.
- Trois tailles de couvercle (simple, double, triple).
- Jusqu'à 4 couvercles individuels pour une armoire compacte.
- Jusqu'à 6 couvercles individuels pour une armoire pleine profondeur.

Tiroirs linéaires

- Tiroirs larges simples/doubles.
- Jusqu'à 7 sections pour une armoire compacte.
- Jusqu'à 10 sections pour une armoire pleine profondeur.

Tiroirs à matrices

- Disponibles en profondeur simple, double et triple.
- Jusqu'à 56 compartiments pour une armoire compacte.
- Jusqu'à 80 sections pour une armoire pleine profondeur.



Unité de comptoir de base 12

La plus petite des armoires medDispense®

- Ce meuble de comptoir compact s'adapte pratiquement partout.
- Idéal pour les zones ayant des besoins en capacité plus faibles.
- Capacité maximale de 84 unités.

La série medDispense® C s'intègre avec :
les séries F et V.



Protection
antimicrobienne

Dimensions intérieures du tiroir

Type de tiroir	Longueur	Largeur	Hauteur	Volume
Largeur simple Compact linéaire	347,7 mm (13,7 po)	83,3 mm (3,3 po)	55,1 mm (2,1 po)	1 596,1 cm ³ (97,4 po ³)
Largeur simple Linéaire pleine profondeur	500,1 mm (19,7 po)	83,3 mm (3,3 po)	55,1 mm (2,1 po)	2 295,8 cm ³ (140,1 po ³)
Double largeur Compact linéaire	347,7 mm (13,7 po)	188,0 mm (7,4 po)	55,1 mm (2,1 po)	3 601,9 cm ³ (219,8 po ³)
Double largeur Linéaire pleine profondeur	500,1 mm (19,7 po)	188,0 mm (7,4 po)	55,1 mm (2,1 po)	5 919,0 cm ³ (316,2 po ³)
1 Matrice profonde compacte	366,3 mm (14,4 po)	596,1 mm (23,5 po)	58,2 mm (2,3 po)	12 700 cm ³ (775 po ³)
1 Matrice profonde Profondeur totale	518,7 mm (20,4 po)	596,1 mm (23,5 po)	58,2 mm (2,3 po)	17 976,7 cm ³ (1 097 po ³)
2 Matrices profondes compactes	366,3 mm (14,4 po)	596,1 mm (23,5 po)	142 mm (5,6 po)	31 004,4 cm ³ (1 892 po ³)
2 Matrices Profondes Profondeur totale	518,7 mm (20,4 po)	596,1 mm (23,5 po)	142 mm (5,6 po)	43 901,0 cm ³ (2 679 po ³)
3 Matrices profondes compactes	366,3 mm (14,4 po)	596,1 mm (23,5 po)	225,8 mm (8,9 po)	49 308,8 cm ³ (3 009 po ³)
3 Matrices profondes Profondeur totale	518,7 mm (20,4 po)	596,1 mm (23,5 po)	225,8 mm (8,9 po)	69 825,4 cm ³ (4 261 po ³)

Système à couvercle

Type de compartiment	Longueur	Largeur	Hauteur	Volume
Couvercle simple	45,5 mm (1,8 po)	88,9 mm (3,5 po)	50,8 mm (2,0 po)	205,5 cm ³ (12,6 po ³)
Double couvercle	121,7 mm (4,8 po)	88,9 mm (3,5 po)	50,8 mm (2,0 po)	549,6 cm ³ (33,6 po ³)
Couvercle triple	198,0 mm (7,8 po)	88,9 mm (3,5 po)	50,8 mm (2,0 po)	893,7 cm ³ (54,6 po ³)



À couvercle



Simple largeur linéaire



Double largeur linéaire



Tiroir à matrices

Série medDispense® C

Unités de base



Configuration	Base 12	Base 30	Base 60	Base à approvisionner
Dimensions de l'unité	Largeur : 685,8 mm (27 po) Profondeur : 558,8 mm (22 po) Hauteur : 668 mm (26,2 po) *	Pleine profondeur : Largeur : 685,8 mm (27 po) Profondeur : 711 mm (28 po) Hauteur : 1 550 mm (61 po) Compact Largeur : 685,8 mm (27 po) Profondeur : 588,8 mm (22 po) Hauteur : 1 550 mm (61 po)	Pleine profondeur : Largeur : 685,8 mm (27 po) Profondeur : 711 mm (28 po) Hauteur : 1 550 mm (61 po) Compact Largeur : 685,8 mm (27 po) Profondeur : 588,8 mm (22 po) Hauteur : 1 550 mm (61 po)	Pleine profondeur : Largeur : 685,8 mm (27 po) Profondeur : 711,2 mm (28 po) Hauteur : 1 550 mm (61 po) Compact Largeur : 685,8 mm (27 po) Profondeur : 588,8 mm (22 po) Hauteur : 1 550 mm (61 po)
Poids	66-73 kg (146-162 lb)	159,2-221,8 kg (351-489 lb)	221,4 kg - 344,3 kg (488-759 lb)	89,8-101,2 kg (198-223 lb)
Nombre maximal de tiroirs	12	30	60	S.O.
Matériau de construction	Cadre en acier avec tiroirs en polymère et portes en métal.			

* Hauteur mesurée jusqu'au sommet de l'écran. Ajoutez 43,69 mm (1,72 po) supplémentaires pour l'option du pont supérieur.
Prévoir un espace de 88,9 mm (3,5 po) au niveau du mur pour la ventilation.



Configuration	Base intégrée
Dimensions de l'unité	Pleine profondeur : Largeur : 685,8 mm (27 po) Profondeur : 711 mm (28 po) Hauteur : 1 981 mm (78 po) Compact Largeur : 685,8 mm (27 po) Profondeur : 558,8 mm (22 po) Hauteur : 1 981 mm (78 po)
Poids	253,6-382,3 kg (558-841 lb)
Nombre maximal de tiroirs	60
Matériau de construction	Cadre en acier avec portes en polymère.

Prévoir un espace de 88,9 mm (3,5 po) au niveau du mur pour la ventilation.

Stockage en masse de grande capacité

- Accès authentifié pour les articles en masse.
- Bacs et étagères modulables pour s'adapter à une variété d'articles en masse.
- L'option de porte métallique ajoute un niveau supplémentaire de confidentialité et de sécurité.

Série medDispense® C

Unités auxiliaires



Configuration	Auxiliaire 12	Auxiliaire 30	Auxiliaire 60	Tour hybride
Dimensions de l'unité	Largeur : 685,8 mm (27 po) Profondeur : 558,8 mm (22 po) Hauteur : 355,6 mm (14 po) *	Pleine profondeur : Largeur : 685,8 mm (27 po) Profondeur : 711,2 mm (28 po) Hauteur : 1 118 mm (44 po) * Compact Largeur : 685,8 mm (27 po) Profondeur : 558,8 mm (22 po) Hauteur : 1 118 mm (44 po) *	Pleine profondeur : Largeur : 685,8 mm (27 po) Profondeur : 711,2 mm (28 po) Hauteur : 1 118 mm (44 po) * Compact Largeur : 685,8 mm (27 po) Profondeur : 558,8 mm (22 po) Hauteur : 1 118 mm (44 po) *	Pleine profondeur : Largeur : 685,8 mm (27 po) Profondeur : 711,2 mm (28 po) Hauteur : 1 981 mm (78 po) Compact Largeur : 685,8 mm (27 po) Profondeur : 558,8 mm (22 po) Hauteur : 1 981 mm (78 po)
Poids	55,8-63,5 kg (123-140 lb)	142,9-205,5 kg (315-453 lb)	204,6-327,5 kg (451-722 lb)	248,6-376,9 kg (548-831 lb)
Nombre maximal de tiroirs	12	30	60	60
Matériau de construction	Cadre en acier avec tiroirs en polymère et portes en métal.			

* Hauteur mesurée jusqu'à la surface de travail. Ajoutez 431,8 mm (17 po) supplémentaires pour l'option du pont supérieur.
Prévoir un espace de 88,9 mm (3,5 po) au niveau du mur pour la ventilation.




Configuration	Demi-alimentation	Tour d'alimentation
Dimensions de l'unité	Pleine profondeur : Largeur : 685,8 mm (27 po) Profondeur : 711 mm (28 po) Hauteur : 1 118 mm (44 po)* Compact Largeur : 685,8 mm (27 po) Profondeur : 558,8 mm (22 po) Hauteur : 1 118 mm (44 po)*	Pleine profondeur : Largeur : 685,8 mm (27 po) Profondeur : 711 mm (28 po) Hauteur : 1 981 mm (78 po) Compact Largeur : 685,8 mm (27 po) Profondeur : 558,8 mm (22 po) Hauteur : 1 981 mm (78 po)
Poids	73,5-84,8 kg (162-187 lb)	119,7-136,1 kg (264-300 lb)
Nombre maximal de tiroirs	S.O.	S.O.
Matériau de construction	Cadre en acier avec portes en polymère.	

* Hauteur mesurée jusqu'à la surface de travail. Ajoutez 431,8 mm (17 po) supplémentaires pour l'option du pont supérieur. Prévoir un espace de 88,9 mm (3,5 po) au niveau du mur pour la ventilation.

Le plus haut niveau de sécurité avec une distribution de doses uniques permettant de garantir l'accès à la quantité requise uniquement.

medDispense®
F series

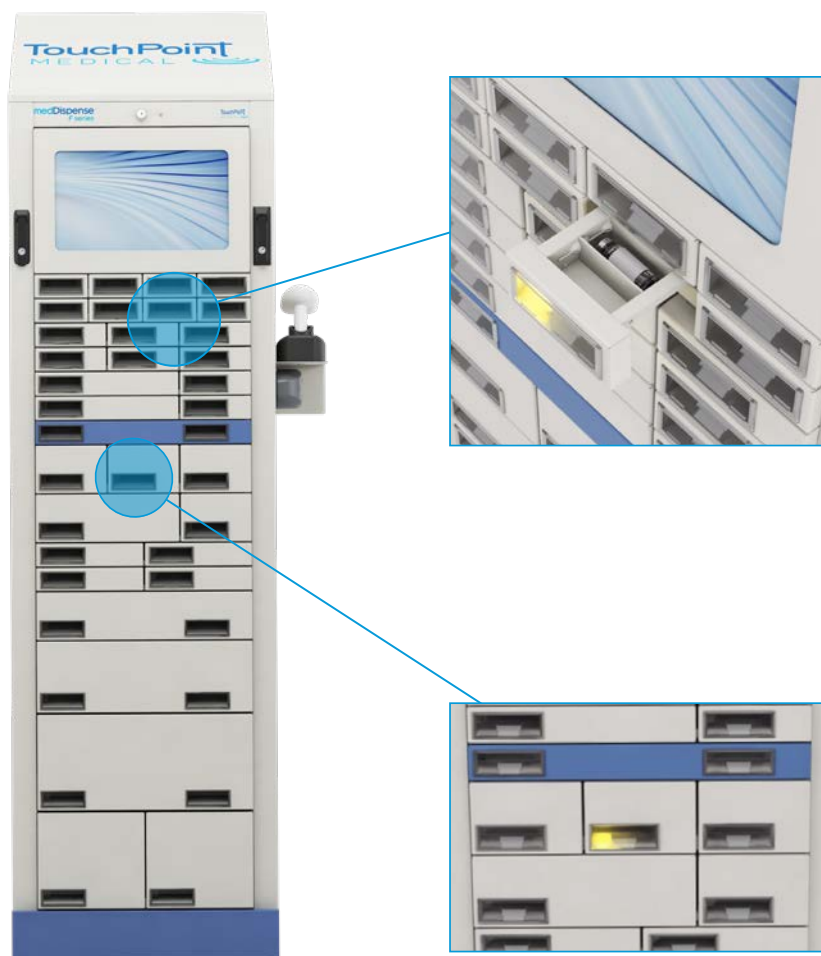

Unité de base de la série F

Distribution ultra-sécurisée de médicaments

- Compartiments en acier à dose unique avec jusqu'à 12 tiroirs progressifs pour garantir l'accès uniquement au médicament demandé.
- La construction en acier satisfait les exigences du NHS en matière de médicaments contrôlés.

Hautement configurable et extensible

- Jusqu'à 15 tailles de tiroirs différentes pour s'adapter au niveau désiré de sécurité et à la taille des articles.
- Prend en charge trois types de distribution :
 - Dose unique
 - Article unique
 - Linéaire/Matriciel
 - Multimode

Technologie de distribution efficace

- La technologie Pick-to-Light facilite et accélère le repérage et la distribution des articles sélectionnés.
- Les lumières vous guident vers :
 - La bonne armoire
 - Le bon tiroir

La série medDispense® F s'intègre avec :
Les séries C et V.



Rangement du clavier

- Le tiroir permet de ranger et de protéger le clavier jusqu'à son utilisation.
- Il est doté d'un clavier intégré de taille standard.
- Disponible en version standard ou de comptoir.



Protection
antimicrobienne

Système medDispense®

Série F



Dimensions de l'unité	Unité auxiliaire : Largeur : 545 mm (21,5 po) Profondeur : 520 mm (20,5 po) Hauteur : 2 003 mm (78,6 po)	Unité de base : Largeur : 545 mm (21,5 po) * Profondeur : 520 mm (20,5 po) Hauteur : 2 003 mm (78,6 po)	Unité de base : Largeur : 545 mm (21,5 po) Profondeur : 520 mm (20,5 po) Hauteur : 660,4 mm (26 po)
Poids	245 kg (540 lb)	245 kg (540 lb)	128 kg (282 lb)
Nombre de niveaux dans l'armoire	28	25	8
Matériau de construction	Cadre et tiroirs en acier.	Cadre et tiroirs en acier.	Cadre et tiroirs en acier.

* Largeur supplémentaire de 114,3 mm (4,5 po) pour le lecteur de codes-barres.

Prévoir un espace de 88,9 mm (3,5 po) au niveau du mur pour la ventilation.

Dimensions intérieures du tiroir

Type de tiroir (Rangées occupées)	Hauteur	Largeur	Volume
A (1)	23 mm (0,9 po)	97 mm (3,8 po)	765,2 cm ³ (46,2 po ³)
AT (1,5)	49 mm (1,9 po)	96 mm (3,8 po)	1 613,5 cm ³ (97,5 po ³)
AA (1)	23 mm (0,9 po) 23 mm (0,9 po)	250 mm (9,8 po) 97 mm (3,8 po)	1 972,3 cm ³ (119,1 po ³) 765,2 cm ³ (46,2 po ³)
B (2)	68 mm (2,7 po)	97 mm (3,8 po)	2 262,4 cm ³ (138,5 po ³)
BB (2)	68 mm (2,7 po) 68 mm (2,7 po)	250 mm (9,8 po) 97 mm (3,8 po)	5 831 cm ³ (357,2 po ³) 2 262,4 cm ³ (138,5 po ³)
C (1)	23 mm (0,9 po)	175 mm (6,9 po)	1 293,8 cm ³ (79 po ³)
CT (1,5)	49 mm (1,9 po)	175 mm (6,9 po)	2 857,2 cm ³ (171,9 po ³)
D (2)	68 mm (2,7 po)	175 mm (6,9 po)	4 081,7 cm ³ (251,5 po ³)
E (1)	23 mm (0,9 po)	394 mm (15,5 po)	3 108,3 cm ³ (188,3 po ³)
F (2)	68 mm (2,7 po)	394 mm (15,5 po)	8 140,1 cm ³ (565 po ³)
G (3)	120 mm (4,7 po)	394 mm (15,5 po)	16 217 cm ³ (983,5 po ³)
H (4)	173 mm (6,8 po)	394 mm (15,5 po)	23 649,9 cm ³ (1 443,8 po ³)
J (4)	173 mm (6,8 po)	175 mm (6,9 po)	10 204,3 cm ³ (624,1 po ³)
Z (1)	23 mm (0,9 po)	55 mm (2,2 po)	433,9 cm ³ (26,7 po ³)
ZT (1,5)	49 mm (1,9 po)	60 mm (2,4 po)	1 008,4 cm ³ (61,6 po ³)

Longueur des tiroirs : 343 mm (13,5 po)
 Le nombre maximal de colonnes pour toutes les unités est de 12.
 L'unité de base comporte 26 rangées (25 plus une pour le clavier).
 L'unité auxiliaire comporte 28 rangées.

Z	Z	Z	Z
A		A	A
AA			A
B		B	B
BB			B
C		C	
D		D	
ZT*	ZT*	ZT*	ZT*
AT*		AT*	AT*
CT*		CT*	
E			
F			
G			
H			
J		J	

**Dimensions de tiroirs non standard
disponibles sur demande.**

* Les tiroirs AT, CT et ZT doivent être
utilisés par paires.

Stockage et traçabilité des médicaments et fournitures en masse. Idéaux pour le stockage des médicaments contrôlés par la pharmacie centrale.

medDispense®
V series



Série V avec
portes en acier



Identification facile et sécurisée

- Consommation de produits réduite et coûts de stockage inférieurs.
- Contrôle d'une gamme d'objets volumineux ou encombrants.
- Visibilité améliorée avec une porte avant transparente.

Technologie de distribution efficace

- La technologie Pick-to-Light facilite et accélère le repérage et la distribution des articles sélectionnés.
- Les lumières vous guident vers :
 - La bonne armoire
 - La porte
- L'éclairage intégré des tiroirs améliore la visibilité des médicaments stockés.

Volume important

- Jusqu'à neuf compartiments sécurisés par colonne.
- Plusieurs produits/unités de stock par porte.

La série medDispense® V s'intègre avec :
Les séries C et F.



Armoire triple série V
avec portes pleines



Série V
avec portes
transparentes

Sécurité et confidentialité

- Construction à ossature métallique.
- Options de porte avant transparentes ou métalliques.

Armoires configurables

- Il est possible de combiner trois dimensions de portes standard dans un même cadre afin d'optimiser la capacité.
- Option triple armoire disponible avec portes pleines et transparentes.

Idéales pour le stockage des substances contrôlées par la pharmacie centrale.

- Combinées au module medGuard™, la série V offre une solution en boucle fermée pour votre gestion contrôlée des médicaments.



Protection
antimicrobienne

Système medDispense®


Série V



Dimensions de l'unité	Porte transparente : Largeur : 375 mm (14,8 po) Profondeur : 524 mm (20,6 po) Hauteur : 2 030 mm (80 po)	Porte en acier : Largeur : 1 093 mm (43 po) Profondeur : 524 mm (20,6 po) Hauteur : 2 030 mm (80 po)
Poids	Armoire simple : 55 kg (110 lb)	Armoire triple : 175 kg (386 lb)
Matériau de construction	Cadre en acier avec portes en polycarbonate.	Cadre en acier et portes métalliques.

Prévoir un espace de 88,9 mm (3,5 po) au niveau du mur pour la ventilation.

Options de portes et de rangement de la série V

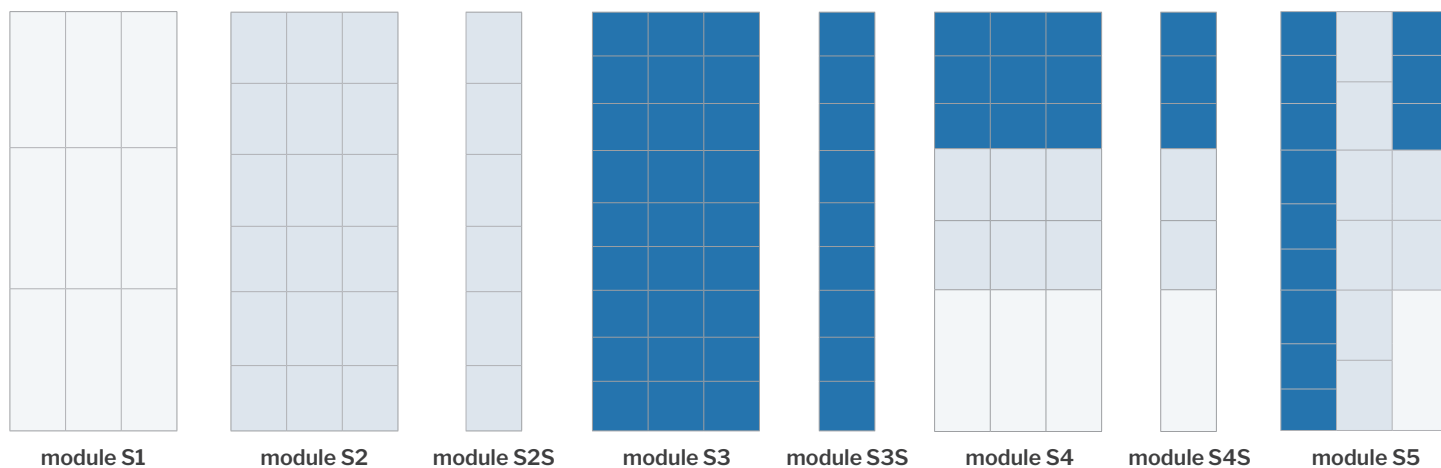

8 types d'unités disponibles, chacune avec un nombre spécifique de compartiments.

Configuration d'armoire triple

Module	Configuration
S1	9 grandes portes
S2	18 portes moyennes
S2S	6 portes simples moyennes
S3	27 petites portes
S3S	9 petites portes simples
S4	9 petites portes, 6 portes moyennes, 3 grandes portes
S4S	1 grande porte simple, 2 portes moyennes et 3 petites portes simples
S5	12 petites portes, 8 portes moyennes, 1 grande porte

Armoires à portes en acier fabriquées dans toutes les configurations. Les armoires à portes transparentes ne peuvent être fabriquées que dans les configurations S2, S3 et S4.

Dimensions des portes

Dimensions de la porte	Petit	Moyen	Large
Hauteur	154 mm (6,1 po)	254 mm (10 po)	515 mm (20,3 po)
Largeur	320 mm (12,6 po)	320 mm (12,6 po)	320 mm (12,6 po)
Profondeur	480 mm (19 po)	480 mm (19 po)	480 mm (19 po)
Volume	23 654,4 cm ³ (1 460,3 po ³)	39 014,4 cm ³ (2 394 po ³)	7 910,4 cm ³ (4 859,8 po ³)

Contrôle d'accès sur vos armoires existantes
avec des outils de gestion des utilisateurs pour
la traçabilité et bien plus encore.

medDispense®
E series



Contrôle d'accès

- L'accès par badge élimine le besoin de clés.
- La gestion des utilisateurs permet un accès contrôlé aux armoires.
- Alertes pour les portes laissées ouvertes.
- Traçabilité des accès aux armoires.
- Connexion sans fil.

Cas d'utilisation potentiels


- Infirmerie.
- Ambulances.
- Services informatiques.
- Armoires pour médicaments contrôlés.
- Stockage de grande valeur.



Atouts de la série E de TouchPoint Medical

- Crée un historique des accès aux armoires par utilisateur.
- L'absence de clés pouvant être perdues ou de clés à partager permet au personnel infirmier de passer plus de temps avec les patients et moins de temps à chercher les clés.
- Système logiciel permettant l'audit, l'établissement de rapports, le suivi de la conformité et bien plus encore.
- Notre serrure s'intègre parfaitement à votre armoire existante.

Architecture du système

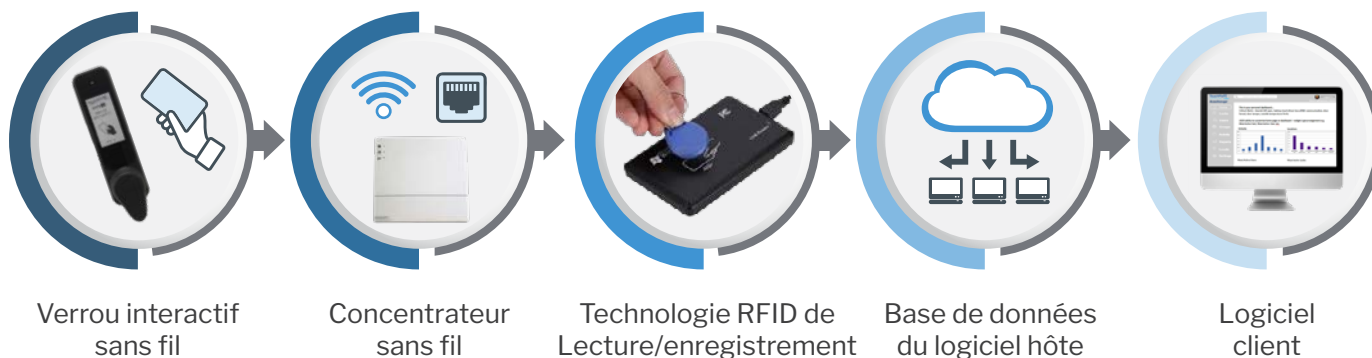

Le système nécessite le concentrateur Bluetooth fourni par TouchPoint Medical.
TouchPoint Medical a fourni des étiquettes/autocollants à faible consommation d'énergie pour l'accès.

Caractéristiques du système

Dimensions du boîtier

Boîtier	Largeur	Longueur	Profondeur
Boîtier de commande (partie intérieure de l'armoire)	1,375 po	5,375 po	1,5 po
Boîtier de verrouillage (partie extérieure du meuble)	1,375 po	5,375 po	1,0 po

Le boîtier est en ABS et matériaux antimicrobiens.
Installation horizontale ou verticale.

Taille de l'écran

Écran	Largeur	Hauteur
Écran à papier électronique (intégré au boîtier de verrouillage)	1,0 po	2 po

Spécifications des portes

Épaisseur des portes	Matériau des portes
0,05 po à 0,9 po (1 mm à 23 mm)	bois, plastique, métal

Spécifications de la batterie

Type de batterie	Espérance de vie
3 piles AA (4,5 V 1 A)	1 an (en fonctionnement normal)

Série medDispense® C

Armoire de distribution automatisée à vocation éducative



Idéale pour les laboratoires de simulation en soins de santé et en technologie pharmaceutique

TouchPoint Medical offre aux étudiants travaillant dans des laboratoires de simulation un accès rentable à des produits de haute qualité, permettant ainsi aux professeurs et au personnel de créer des expériences pédagogiques percutantes qui préparent nos futurs héros de la santé au succès.

- L'unité comporte six tiroirs standard de 83,3 mm (3,28 po) de large, neuf tiroirs doubles de 188 mm (7,4 po) de large, un tiroir à matrice et un espace de stockage en masse sur la partie inférieure de l'unité.
- Chaque tiroir peut être configuré pour contenir jusqu'à 7 articles différents ou 1 substance contrôlée, comme dans une unité hospitalière classique.
- Cette unité pédagogique de la série C est dotée d'un logiciel de simulation préchargé qui peut être modifié en fonction de l'évolution de vos besoins.
- Aucun serveur ni réseau requis.

Caractéristiques du système

Alimentation requise	• Prise de courant alternatif de 120 V minimum, 10 A (fiche rouge de préférence). • Configurable en courant alternatif de 230 V, 5 A minimum, avec cordon d'alimentation de type C13 IEC-320.
Dimensions de l'unité	• Largeur : 685,8 mm (27 po) Profondeur : 588,8 mm (22 po) Hauteur : 1 550 mm (61 po)

À des fins éducatives uniquement. Ne pas utiliser à des fins cliniques ou diagnostiques. À utiliser uniquement sous la supervision directe d'un instructeur qualifié ayant reçu une formation spécifique pour l'utilisation de ce produit. TouchPoint Medical décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée de cet équipement.

Accessoires medDispense®

Les équipements évoluent dans le temps et notre gamme d'accessoires peut être ajoutée ou retirée pour s'adapter à vos besoins.



Superstructure

Augmentez l'espace de stockage de toutes les unités. Disponible en format large ou standard sur la série C.




Superstructure

Augmentez l'espace de stockage de toutes les unités. Disponible en format large ou standard sur la série C.




Bac de retour externe

Gérez les médicaments à retourner grâce au bac de retour externe qui peut être monté sur la superstructure. Disponible sur les séries F, C et A.

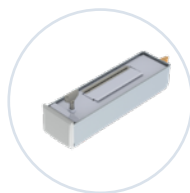

Tiroir de retour

Tiroir de retour intégré dans le système de tiroirs rendant plus sûr le processus de retour. Disponible en largeur standard ou double sur les armoires de la série C.

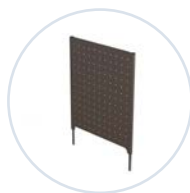


Superstructure

Augmentez l'espace de stockage de toutes les unités. Disponible en format large ou standard sur la série C.



Superstructure

Augmentez l'espace de stockage de toutes les unités. Disponible en format large ou standard sur la série C.

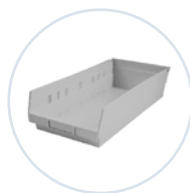

Bacs de stockage en vrac

Disponibles en plusieurs tailles pour la série C pour les espaces d'approvisionnement.



Imprimante thermique

Ajoutez une imprimante thermique pour le patient et délivrez des reçus de transaction spécifiques. Disponible sur les séries F et C.



Imprimante d'étiquettes

Ajoutez une imprimante d'étiquettes pour imprimer les étiquettes des médicaments et des patients. Disponible sur les séries F et C.

Rapide. Réactif. Courtois.

Nous nous engageons à vous apporter un accompagnement consultatif et réactif tout au long de notre partenariat.



CONCEPTION ET DISPOSITION

Votre chargé de compte expérimenté vous aidera à concevoir une configuration du système adaptée à vos besoins spécifiques en matière de stockage des médicaments et de flux de travail.



INSTALLATION ET FORMATION

L'équipe de services professionnels de TouchPoint Medical sera présente à chaque étape du processus de configuration, d'installation et de déploiement de la solution, ainsi qu'à chaque étape de la formation relative à cette solution.



ASSISTANCE TECHNIQUE

L'équipe d'assistance technique de TouchPoint Medical fournit une assistance téléphonique internationale.



MISES À JOUR LOGICIELLES

Des améliorations logicielles gratuites sont disponibles et annoncées aux clients dès leur sortie.



GARANTIE

Chaque armoire sera couverte par une garantie standard de 5 ans.



Contactez votre représentant TouchPoint Medical pour en savoir plus et discuter des accessoires supplémentaires spécifiques à votre application de gestion des médicaments. **Visitez touchpointmed.com/contact pour entrer en contact avec votre représentant local.**

UNE ENTREPRISE MONDIALE AVEC UNE TOUCHE LOCALE

TouchPoint Medical place à la pointe de l'industrie médicale un réseau mondial de fabrication, de qualité et d'ingénierie. De la qualité et des performances à l'esthétique et à l'ergonomie, nous savons que les petits détails font toute la différence pour nos clients. Nous fournissons des solutions technologiques et des services médicaux axés sur le client à des milliers d'hôpitaux et d'établissements de soins dans le monde entier.



BRINGING CARE FORWARD.™

Siège mondial et Amériques
Bureau du service client et
d'assistance technique
Odessa, Floride, États-Unis
Tél. : (1) 800 947 3901

Siège européen
Bureau du service client et
d'assistance technique
Kruibeke, Belgique
Tél. : (32) 3 432 53 00

Chine, Taïwan, Japon,
Corée, Hong Kong
Shanghai, Chine
Tél. : (86) 21 5046 3232

Royaume-Uni
Rugby, Royaume-Uni
Tél. : (44) (0) 844 576 1247

Moyen-Orient/Afrique
Dubai, Émirats arabes unis
Tél. : (971) 55 5963 092

Asie du Sud-Est,
Australie/
Nouvelle-Zélande
Victoria, Australie
Tél. : (61) 3 9330 5050

Région nordique
Asker, Norvège
Tél. : (47) 31 90 97 60
Jonsered, Suède
Tél. : (46) (0) 31 747 20 50