



AccessRx MD™



AccessRx Exchange™



AccessRx Secure™

Contribuiamo a chiudere il ciclo della somministrazione di farmaci.

La serie di carrelli per la consegna di farmaci AccessRx fornisce soluzioni per trasportare e somministrare i farmaci in modo più sicuro ed efficiente al posto letto del paziente.

POSTAZIONI DI LAVORO PER LA CONSEGNA DEI FARMACI



	AccessRx MD™	AccessRx Exchange™	AccessRx Secure™
Numero massimo di contenitori	12	24	12
Opzioni del cassetto configurabili	✓	✓	✓
Contenitori per farmaci intercambiabili		✓	
Cassetti paziente a chiusura individuale	✓		✓
Collegamenti software all'HIS	✓		
Opzioni del cassetto di sostanze controllate	✓	✓	✓
Assegnazione del contenitore paziente	Automatica	Manuale	Manuale
Materiale del carrello con infusione antimicrobica	✓ PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN™	✓ PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN™ <i>*non include il contenitore</i>	✓ PROTECTION THAT LIVES ON MICROBAN™

PRINCIPALI VANTAGGI



Contenitori e cassette a chiusura individuale



Supporto del BCMA in tempo reale



Supporto del flusso di lavoro di evasione dei farmaci centralizzato o decentralizzato



Contenitori per farmaci intercambiabili




Protezione e monitoraggio dei farmaci per i pazienti



Tecnologia Li-Nano avanzata con 5 anni di garanzia

Chiusura del ciclo di consegna dei farmaci tra la farmacia e il letto del paziente.

AccessRx MD™

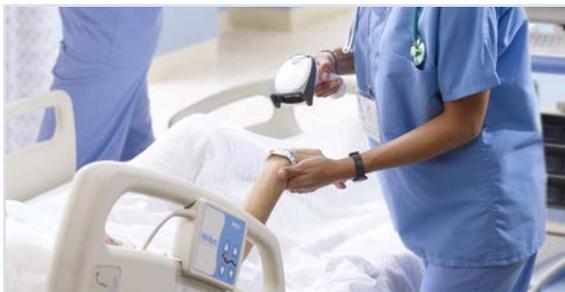


Sicurezza e visibilità dei farmaci al posto letto

- È possibile accedere ai cassetti a chiusura individuale specifici per paziente tramite la scansione del codice a barre dell'ID paziente
- La somministrazione in tempo reale di farmaci al posto letto, l'identificazione del paziente con codice a barre e l'accesso diretto all'API eMAR semplificano il processo BCMA, riducono la ridondanza e aumentano la precisione
- Cassetti paziente assegnati automaticamente tramite l'interfaccia ADT (Ammissione/Dimissione/Trasferimento) ed eliminazione dell'etichettatura manuale dei cassetti, dispendiosa in termini di tempo e soggetta a errori
- Utilizza l'Active Directory dell'ospedale per un'autenticazione coerente dell'utente
- I campi di visualizzazione configurabili del cassetto consentono la personalizzazione dell'interfaccia utente

Ottimizza il tuo flusso di lavoro

- Protegge e monitora i farmaci specifici per i pazienti per un massimo di 12 pazienti in cassetti a chiusura individuale, riducendo gli spostamenti e il tempo trascorso presso l'ADC
- ADT e ordini dei pazienti trasmessi al carrello tramite rete wireless per agevolare una più rapida consegna dei farmaci
- Riduzione degli spostamenti e del tempo trascorso presso l'armadio di distribuzione automatizzato

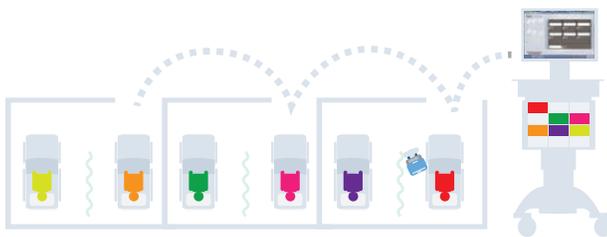



Maggiore controllo e flessibilità per i farmacisti attraverso un'ampia gamma di modelli di distribuzione delle farmacie

- La console AccessManager™ basata su browser fornisce l'accesso ai rapporti consentendo la gestione degli utenti, la gestione dell'apparecchiatura e la configurazione del sistema compatibili con Active Directory
- I controlli degli accessi configurabili basati sul tempo riducono il rischio di somministrazione di farmaci in un momento errato e agevolano la riconciliazione in farmacia per i farmaci non utilizzati
- Interfaccia degli ordini di farmaci opzionali: Rx MD può fungere da compilatore di ordini di farmaci per il paziente e verificare che un ordine sia stato somministrato.
- Avvisi alla farmacia tramite e-mail sicure per pazienti trasferiti e dimessi



Architettura e integrazione software scalabili e centralizzate

- Multi-Org: architettura scalabile che offre la possibilità di passare da una camera ospedaliera con due letti a un sistema sanitario multi-struttura
- Capacità di impostare i diritti di accesso al sistema sanitario, ad esempio per reparto
- Rapporti aziendali disponibili
- Implementazione multi-struttura aziendale
- Conformità HL7, interfaccia ADT (dati demografici paziente) e interfaccia RDE (ordini approvati dalla farmacia)
- Il motore di interfaccia configurabile comunica facilmente con l'HIS
- Gestione dei progetti, installazione e formazione da parte del team di servizi professionali di TouchPoint Medical

Configura il tuo sistema per soddisfare i requisiti in termini di farmaci e forniture.



Dimensioni

Larghezza
Altezza
Profondità
Volume

	Specifiche cassetto da 102 mm (4 in)	Specifiche cassetto da 152 mm (6 in)	Specifiche del cassetto di sostanze controllate a piena larghezza
Larghezza	91,4 mm (3,6 in)	142,2 mm (5,6 in)	271,8 mm (10,7 in)
Altezza	238,8 mm (9,4 in)	238,8 mm (9,4 in)	228,6 mm (9 in)
Profondità	55,9 mm (2,2 in)	55,9 mm (2,2 in)	50,8 mm (2 in)
Volume	1213 cm ³ (74 in ³)	1885 cm ³ (115 in ³)	3195 cm ³ (195 in ³)

Aumenta l'efficienza e la sicurezza con la distribuzione centralizzata dei farmaci.

AccessRx Exchange™



Postazione di lavoro AccessRx Exchange™ su ruote

- Riassortimento facilitato in qualsiasi postazione. Può essere facilmente rifornita o scambiata in farmacia o direttamente sul carrello.
- Opzioni di sicurezza disponibili: blocco elettronico o con chiave
- Aggiorna facilmente la tua postazione di lavoro AccessPoint™ in loco con il sistema Exchange Cassette
- Può essere aggiunto a carrelli motorizzati o non alimentati
- Funziona con carrelli elevatori sia manuali che elettrici




Contenitori intercambiabili

- Rifornimento semplice e diretto sulla postazione di lavoro mobile o sul supporto a parete
- Disponibile nelle versioni da due, tre o quattro ripiani e in svariate dimensioni del contenitore e opzioni del cassetto di forniture
- Carico nominale fino a 2,2 kg (5,5 libbre) per ripiano
- Ingombro compatto adatto al carrello da 600 x 400 mm o all'armadio (sistemi modulari ISO 3394)



Carrelli di trasferimento

- Tutti i carrelli di trasferimento includono una chiusura a serranda
- Tutti i carrelli di trasferimento includono una maniglia estesa
- Le opzioni di chiusura includono il blocco con chiave o il blocco elettronico
- Larghezza singola, opzione di caricamento frontale
- Larghezza doppia, opzione di caricamento laterale

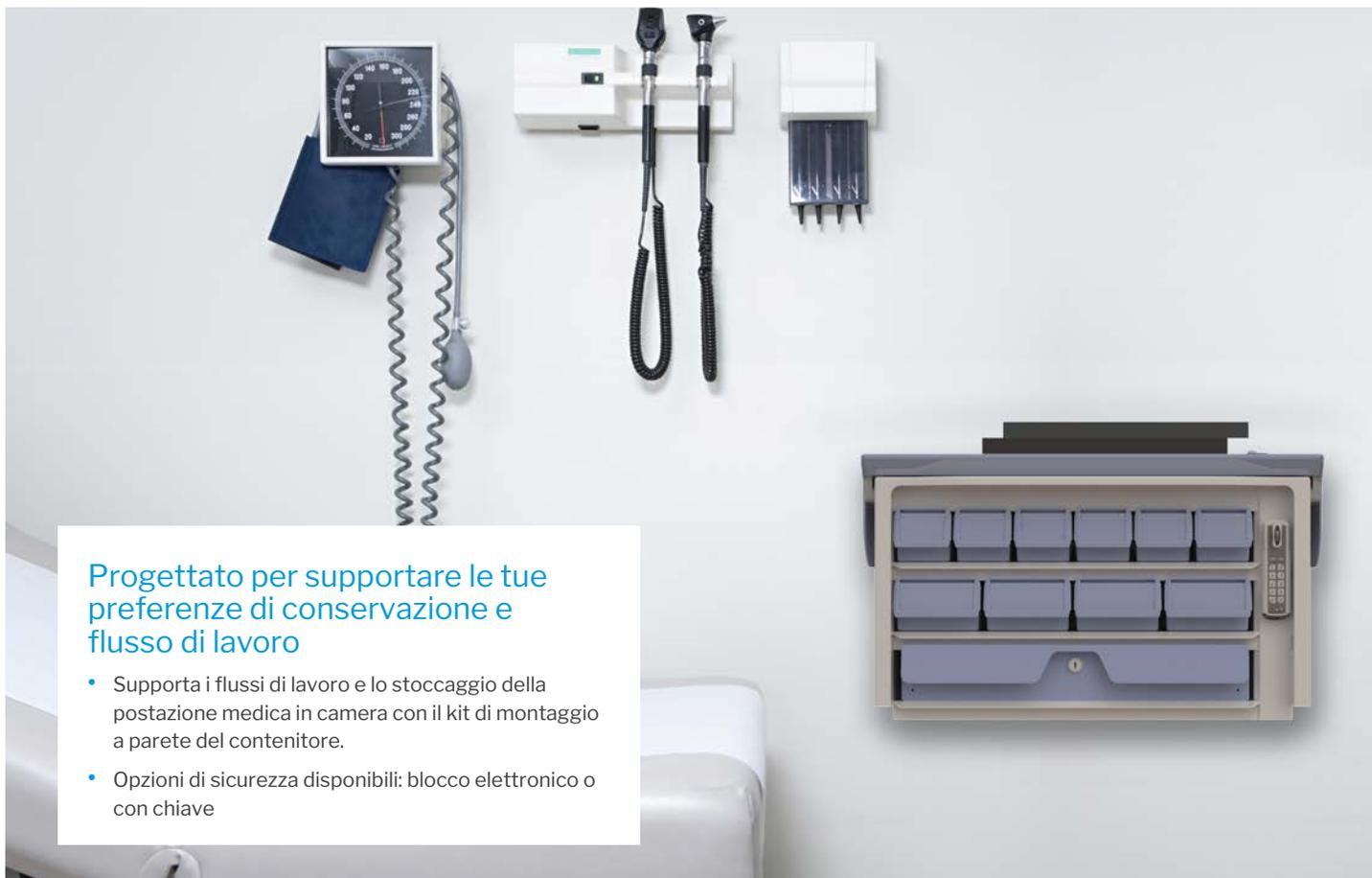

Progettato per supportare le tue preferenze di conservazione e flusso di lavoro

- Supporta i flussi di lavoro e lo stoccaggio della postazione medica in camera con il kit di montaggio a parete del contenitore.
- Opzioni di sicurezza disponibili: blocco elettronico o con chiave



Adatta facilmente la tua gamma AccessPoint™ esistente con il sistema AccessRx Exchange™

- Aggiorna le postazioni di lavoro esistenti con tempi di fermo minimi
- Può essere aggiunto a carrelli motorizzati o non alimentati
- Funziona con carrelli elevatori sia manuali che elettrici



Opzioni di blocco flessibili

Caratteristiche del blocco elettronico a pulsanti:

- 20 codici per blocco: 19 codici utente e un codice supervisore; la lunghezza del codice è di 4-8 cifre
- 7500 cicli (durata batteria prolungata)
- Conforme ad ADA
- Indicatore batteria scarica
- Lo scomparto batteria è facilmente accessibile dall'esterno del contenitore

Principali caratteristiche di blocco:

- Nucleo di blocco estraibile
- Serie esclusiva di serratura/chave per portacontenitori, contenitori e cassetto per sostanze controllate per una maggiore sicurezza
- Chiusura a scatto laterale con chiave simmetrica

Conserva e mantieni i farmaci al sicuro
presso il posto letto.

AccessRx Secure™



Proteggi i farmaci durante il tuo flusso di lavoro

- Cassetti a chiusura individuale
- Software facile da utilizzare
- Configurazioni di conservazione per proteggere una varietà di farmaci e sostanze controllate
- Cassetti in policarbonato opaco da 4" e 6"
- Stoccaggio con chiusura in alluminio e cassetti per sostanze controllate
- I campi di visualizzazione configurabili del cassetto consentono la personalizzazione dell'interfaccia utente
- Aggiungi le opzioni del software AccessRx MD™ ai carrelli AccessRx Secure™ esistenti per una soluzione scalabile e personalizzata

Configura il tuo sistema per soddisfare i requisiti di farmaci e forniture.

Con un'ampia offerta di dimensioni e opzioni di blocco, puoi essere certo che i farmaci e le forniture saranno conservati in modo sicuro in base alle tue esigenze.

Opzioni dei cassetti e dei contenitori di forniture

					
Opzioni di blocco	Blocco elettronico	Blocco elettronico	Blocco con chiave	Blocco elettronico o con chiave	Blocco elettronico o con chiave
Capacità	6 per ripiano	4 per ripiano	1 per ripiano	1 ogni 2 ripiani	2 ogni 2 ripiani
Dimensioni Larghezza Altezza Profondità	80 mm (3,2 in) 75 mm (3 in) 338 mm (13,3 in)	120 mm (3,2 in) 75 mm (3 in) 338 mm (13,3 in)	480 mm (18,9 in) 75 mm (3 in) 338 mm (13,3 in)	80 mm (3,2 in) 75 mm (3 in) 338 mm (13,3 in)	80 mm (3,2 in) 75 mm (3 in) 338 mm (13,3 in)

Opzioni dei contenitori intercambiabili

	 a 2 ripiani	 a 3 ripiani	 a 4 ripiani
Opzioni di blocco	Chiave o blocco elettronico	Chiave o blocco elettronico	Chiave o blocco elettronico
Dimensioni Larghezza Altezza Profondità	595 mm (24,4 in) 244 mm (9,6 in) 395 mm (15,6 in)	595 mm (24,4 in) 393 mm (13,4 in) 395 mm (15,6 in)	595 mm (24,4 in) 454 mm (17,9 in) 395 mm (15,6 in)

Dimensioni del carrello di trasferimento

	 Carrello di trasferimento a larghezza singola	 Carrello di trasferimento a larghezza doppia
Dimensioni Larghezza Altezza Profondità	710 mm (28 in) 1452 mm (57,2 in) 591 mm (23,3 in)	1020 mm (40,2 in) 1464 mm (57,6 in) 791 mm (31,1 in)

Accessori per contenitori

	 Kit di etichette di identificazione	 Kit divisori
	I coperchi trasparenti a scatto del kit facilitano e velocizzano la sostituzione delle etichette di identificazione	I contenitori supportano fino a 11 divisori ciascuno



Rivolgiti al tuo rappresentante TouchPoint Medical per saperne di più e discutere di ulteriori accessori specifici per la tua applicazione point-of-care. Visita touchpointmed.com/contact per metterti in contatto con il rappresentante di zona.